



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

**BOITE MURALE EXTERIEURE  
AIVIA 200**

## Armoire murale pour DAE (Défibrillateur Automatisée Externe) alimentée sur secteur (24 volts) ouverture libre avec scellés

### AIVIA 200

#### Présentation

L AIVIA 200 peut être installé en intérieur des bâtiments ou en extérieur.

Alliant robustesse et légèreté l AIVIA est composé de deux parties distinctes :

- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de résistance aux chocs. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

#### Signalétique

En face avant figurent la chaîne de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur (cœur brisé par un arc électrique).



#### DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)



# defibtech

La technologie qui sauve des vies

## AIVIA 200

### Fonctionnalités

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité.

L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (leds rouges clignotantes).

L'alarme sonore, option, est activée dès l'ouverture du capot.

Le chauffage, option, est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint.

Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages).


### Positionnement

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur, sur la voie publique par exemple.

Une ventilation réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.

### Dimensions :

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

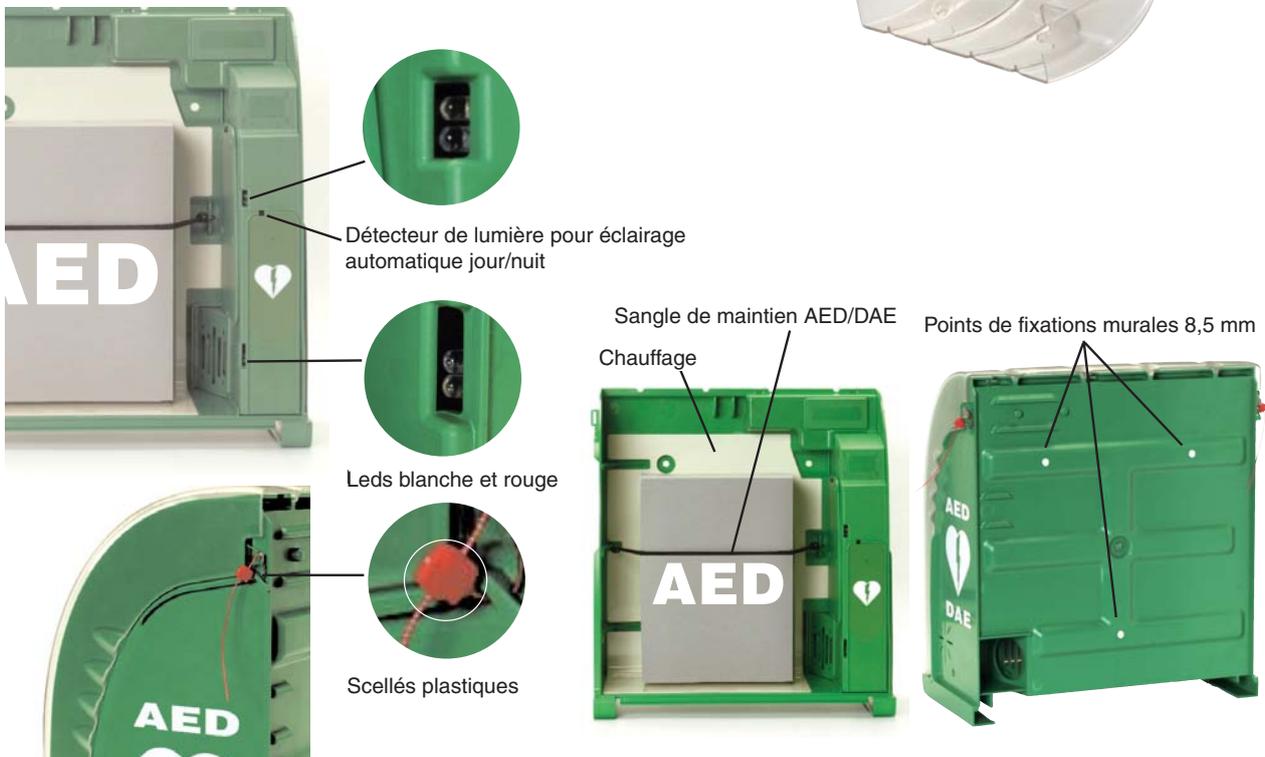

### DefibFrance SARL

Importateur exclusif Defibtech

63, rue Gambetta

92150 Suresnes

Tél : 01 75 61 04 70

Fax : 01 75 61 04 72

info@defibtech.fr

[www.defibtech.fr](http://www.defibtech.fr)